

Système de matelas à pression alternée et à faible perte d'air Med-Aire Assure 5" Air + 3" Foam Base



FIGURE A



FIGURE B

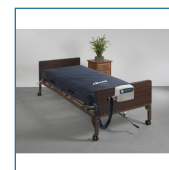


FIGURE C

- Le système de remplacement actif du matelas fournit à la fois une pression alternée et une faible perte d'air pour optimiser la redistribution de la pression, la réduction du cisaillement/friction et le contrôle du microclimat
- Conçu pour prévenir, traiter et guérir les ulcères de pression à la maison ou établissement de soins de longue durée
- L'unité de contrôle offre des cycles de 10 minutes en alternance et peut également être utilisée en mode statique
- Les paramètres de poids du patient réglables permettent une immersion optimale, ainsi que le confort et la conformité du patient
- Alertes d'alarme audio et visuelles lorsque la pression d'air est basse
- Le système comprend 17 cellules d'air individuelles sur une base en mousse de 3" pour une protection contre les pannes de courant
- La fonction d'oreiller assure la stabilité de la tête & confort
- Les cellules d'air de 5" de profondeur sont facilement retirées pour un entretien pratique
- La housse amovible en nylon matelassé est résistante aux fluides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, aidant à protéger la peau des frottements et de l'humidité
- La valve CPR permet un dégonflage rapide
- Le tube se déconnecte rapidement et facilement grâce à la conception EZ Lock/Quick Release

PRODUCTS

Description

14530	8po Faible perte d'air/APM avec base en mousse, 1/ea
-------	--

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Limité à 1 an
Capacité de poids	350 livres
Débit d'air de l'unité de contrôle	8 L/min
Alarmes de l'unité de contrôle	Visuel / Audible
Temps de cycle de l'unité de contrôle	10 minutes
Type d'unité de contrôle	Compresseur
Matériau de la housse de matelas	Nylon résistant aux fluides

ACCESSORIES

Description

14530P	Pompe uniquement, 14530, 1/unité, EA
14530M	Matelas uniquement avec base en mousse, 14530, 1/unité, EA
14530C	COUVERCLE pour 14530, 1/ch, EA